

# pressa

## pressoterapia

pressa  
codice PR001

**pressa** è un moderno e affidabile sistema compressivo di nuova generazione. L'apparecchiatura è destinata per trattamenti terapeutici fisioterapici dove è richiesto pressomassaggio o linfodrenaggio meccanico. L'esattezza delle misurazioni in **pressa**, la polifunzionalità del sistema di programmazione e l'azione dei particolari accessori fisiologici con settori sovrapposti, consente di effettuare lo sblocco dei linfonodi

prima del pressomassaggio.

**pressa** è realizzata con le tecnologie elettroniche più avanzate e gestisce accessori fino ad 8 settori.

**pressa** presenta un sistema di riconoscimento automatico dell'accessorio collegato in modo da evitare eventuali errori nella scelta dei protocolli e/o programmi scelti.

**pressa** permette la regolazione della pressione di esercizio di ogni singolo settore sia in modo automatico che manuale.


## + novità

- > Protocolli terapeutici in memoria per ogni accessorio collegabile
- > Compressore silenzioso
- > Funzione automatica svuotamento finale
- > Connessione rapida degli accessori





dimensioni in **mm**  
peso **6Kg**

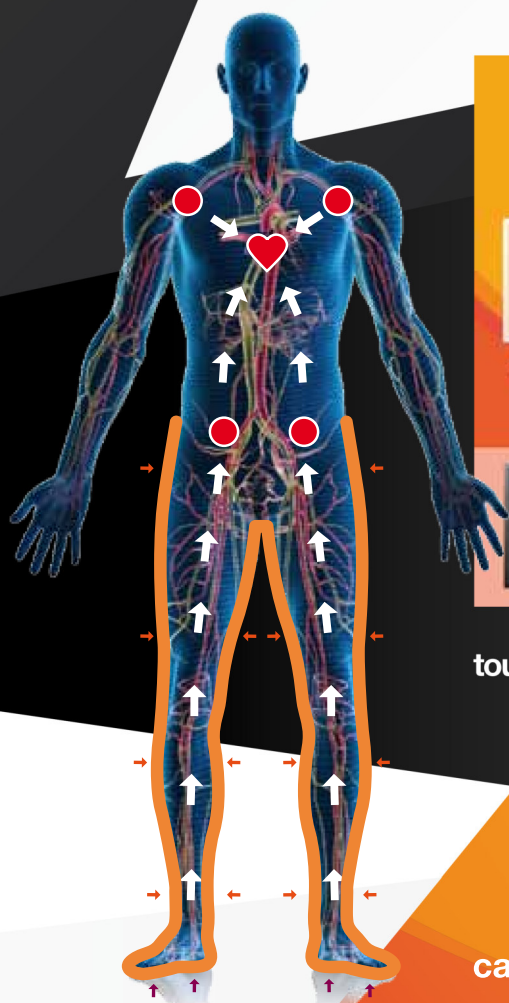

touchscreen 7 pollici

## caratteristiche

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Massima pressione di uscita    | 250 mmHg       |
| Range di pressione sul settore | 30-90          |
| Numero di settori              | 8              |
| Modalità di trattamento        | Tempo o Cicli  |
| Alimentazione                  | 115 or 230 Vac |
| Potenza massima assorbita      | 55 VA          |

**physioled**